



RIDDER | *Assistent*

★★★★★ COMFORT




A170101 A170117

A170110



CONTINUTUL PACHETULUI:

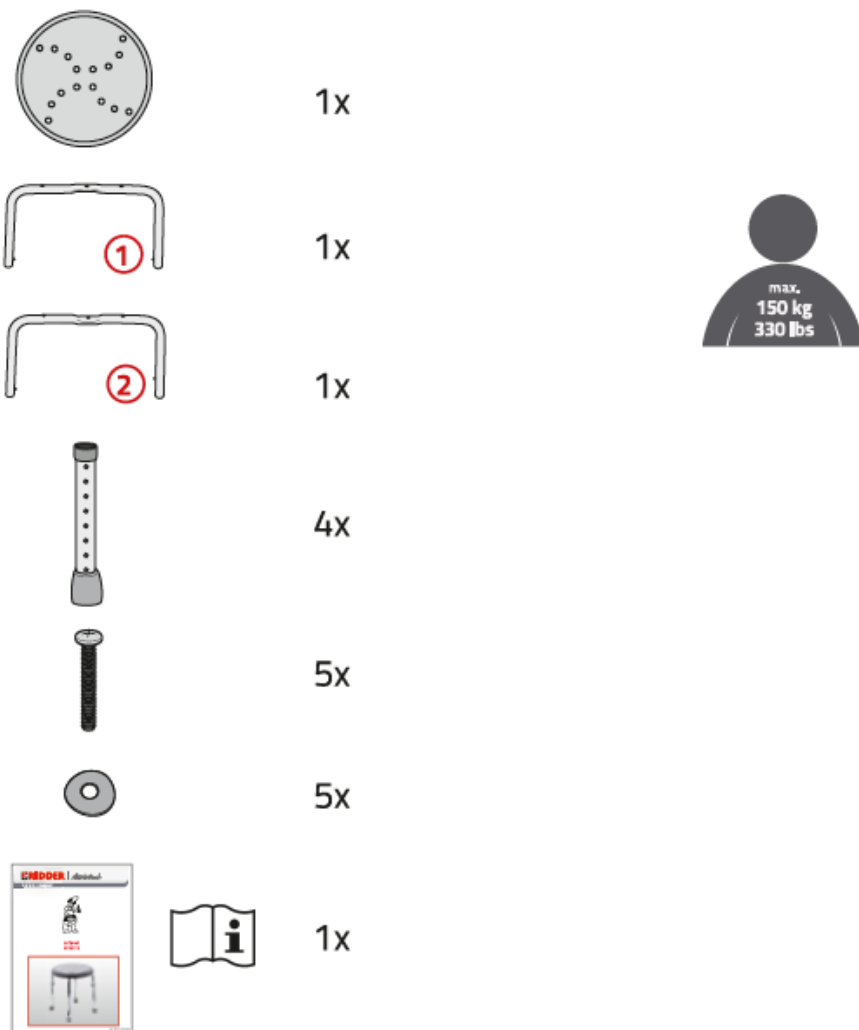

Indicatii importante!

Inaintea oricarei utilizari, verificati in orice caz ca dispozitivul de reglare al inaltimii sa aibe o pozitie uniforma. Picioarele trebuie sa atinga podeaua cu toate cele 4 puncte de contact. Nu va urcati cu picioarele pe scaun. Tineti materialul de ambalare departe de copii. Suprafetele umede pot afecta efectul antiderapant. Certificatul nu contine teste pentru utilizarea de catre persoane/pacienti care se afla in sectoare de reabilitare sau ingrijire medicala. Utilizare maxima recomandata: 5 ani. Nu utilizati produsul daca este deteriorat. Siguranta verificata pana la 150 de kg.

Indicatii privind curatirea si intretinerea:

1. Pentru intretinere, folositi doar detergenti din comert, adecvati produsului.
2. Nu folositi detergenti abrazivi, agresivi sau care contin solventi.
3. Ulterior, se poate usca cu ajutorul unei lavete absorbante.

ASAMBLAREA:

