



RIDDER | *Assistent*




Manual de utilizare

Rolator Comfort

CONTINUTUL PACHETULUI:



Cadru rolator premontat

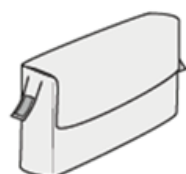

Geanta depozitare



Curea sustinere spate



a



b



c

Sonerie

Lampa LED

Suport pahar



Manual de instructiuni si asamblare



INTRODUCERE:



Draga client,

Iti mulțumim ca ai ales produsul nostru.

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de folosire!

Producatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a cadrului de mers pe jos.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA:

SINTEZA DE SIGURANTA

NU instalati si nu utilizati acest echipament inainte de a citi si a înțelege aceasta fisa de instructiuni. Daca nu puteti intelege avertismentele, precautiile sau instructiunile, contactati un profesionist din domeniul sanatatii sau tehnic personal inainte de a incerca sa instalati acest echipament - in caz contrar, pot aparea daune sau raniri.

Fiecare persoana trebuie sa se consulte intotdeauna cu medicul sau terapeutul sau pentru a determina reglarea si utilizarea corespunzatoare.

Cod articol: A134110-0

Model: Rollator Comfort Plus, negru, incl. sonerie, suport pentru baston, suport pentru pahar si lumina LED

Dimensiuni maxime ale rolatorului montat (LxIxA): aprox. 510 x 930 x 750 mm

Dimensiuni minime ale rolatorului pliat (LxIxA, fara accesorii): aprox. 210 x 850 x 500 mm

Greutate rolator: aprox. 8 kg

Greutate maxima utilizator: 125 kg

Limita maxima de incarcare a gentii: 5 kg

Inaltime sezut: aprox. 570 mm

Dimensiuni sezut: aprox. 450 x 250 mm

Inaltime maner: aprox. 810 - 920 mm

Nerespectarea acestor avertismente poate duce la vatamari corporale.

Toate rotile TREBUIE sa fie in contact cu podeaua in ORICE MOMENT in timpul utilizarii.

Acest lucru va va asigura echilibrarea corespunzatoare a cadrului ajutator de mers pentru interior.

DESCRIERE:

Important: Verificati toate partile ce pot fi deteriorate la transport. In cazul posibilelor daune de expediere, NU folositi produsul, contactati distribuitorul pentru mai multe detalii si instructiuni.



1. Sonerie
2. Maner
3. Centura spate
4. Frana de mana
5. Suport pentru baston
6. Cadru (cablurile de frana sunt plasate in partea interioara)
7. Lumina LED
8. Sezut
9. Snur de pliere
10. Geanta de cumparaturi din material textil cu centura
11. Roata pivotanta cu reflectoare
12. Suport pentru pahare
13. Buton pentru reglarea inaltimii
14. Ajutor la rasturnare
15. Roata spate cu frana

Note privind stabilitatea:

Rolatorul suporta o greutate individuala de pana la 125 kg, INCLUSIV incarcarea gentii, care are o limita de greutate de 5 kg.

Instructiuni de siguranta

! AVERTISMENT!

- Produsul nu este conceput pentru a fi utilizat de catre persoane cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale limitate.
- Nu trebuie utilizat in caz de lipsa de cunostinte sau experienta, cu exceptia cazului in care au fost urmate instructiuni in care au fost explicate riscurile si persoanele in cauza sunt supravegheate de un ingrijitor.
- Orice incident grav legat de produs trebuie raportat producatorului si autoritatii competente.
 - Acest premergator nu este o jucarie! Nu lasati copiii nesupravegheati cand utilizeaza acest produs.
 - Nu utilizati premergatorul sub influenta alcoolului, medicamentelor sau altor droguri care pot afecta abilitatile fizice, mentale si motorii.
 - Toate rotile trebuie sa fie in contact constant cu solul. Acest lucru asigura alinierea corecta a premergatorului. Prin urmare, nu utilizati premergatorul pe terenuri denivelate, cum ar fi nisip sau pietris.
- In special, acordati atentie locurilor denivelate. Daca este posibil, evitati sa treceti peste ele, deoarece rotile s-ar putea bloca.
- Nu utilizati rolatorul pe terenuri acoperite cu gheata si zapada sau pe terenuri foarte umede. Suprafetele alunecoase afecteaza negativ rezistenta la alunecare a rotilor.
 - Nu utilizati rolatorul de mers in conditii de vizibilitate redusa (de exemplu, pe ceata sau noaptea).
 - Daca utilizati rolatorul de mers afara, va rugam sa folositi, daca este posibil, trotuarul. Purtati haine care atrag atentia si reflectorizante. Daca este necesar, va rugam sa aprindeti lumina LED.
 - Nu utilizati rolatorul de mers pe scari sau scari rulante.
 - Transportati obiectele doar in geanta de material textil furnizata. Acordati atentie greutatii maxime a incarcaturii si capacitatii maxime.
 - Nu utilizati cadru de mers ca vehicul in timp ce stati pe el. Inainte de a utiliza scaunul, frana de mana trebuie sa fie activata.
 - Cand reglati inaltimea manerelor, asigurati-va ca adoptati o postura verticala si confortabila. Pentru a preveni o postura gresita, solicitati instructiuni de catre un profesionist in domeniul produselor medicale si de reabilitare.
 - Asigurati-va ca manerele de pe ambele parti sunt setate la aceeasi inaltime si ca suruburile sunt blocate corect.
 - Inainte de fiecare utilizare, verificati functionarea franelor si asigurati-va ca tuburile laterale si scaunul sunt blocate corect.
 - Verificati periodic daca mersul prezinta deteriorari sau uzura.
 - Inlocuiti imediat componentele defecte si nu utilizati mersul pana cand nu a fost complet reparat. Nu faceti nicio modificare la produs.
 - Componentele defecte trebuie inlocuite imediat, iar mersul nu trebuie utilizat pana cand nu a fost complet reparat. Nu faceti nicio modificare la produs

- Nu utilizati produsul daca este deteriorat!
- Respectati intotdeauna limitele maxime de sarcina ale mersului si ale accesoriilor sale. Nu depasiti niciodata aceasta limita, altfel functionarea si stabilitatea produsului nu pot fi garantate.
- Nu stati in picioare pe rolator si nu il utilizati ca ajutor pentru ridicare sau urcare.
- Deoarece rolatorul este echipat cu o functie de pliere, exista intotdeauna, si mai ales in timpul procesului de pliere si de desfasurare, riscul de a va invineti sau prinde.
- Aveti intotdeauna grija sa va protejati degetele si mainile de a fi prinse.
- Risc de arsuri! Nu expuneti mersul la lumina directa a soarelui sau la alte surse de caldura extrema, deoarece materialul se poate incalzi rapid.
- Nu lasati materialul de ambalare la indemana copiilor.

Instructiuni de siguranta pentru lumina LED cu baterie

! AVERTISMENT!

Lumina LED

- Sursa de lumina a acestei lumini LED nu este interschimbabila. Daca este defecta, intreaga lampa trebuie inlocuita, iar lampa defecta trebuie eliminata in mod corespunzator.
- Nu schimbati niciodata lampa singur!
- Utilizati lampa numai daca este atasata corect la rolator.
- Lumina LED poate fi utilizata numai pe rolatorul prevazut pentru aceasta si nu poate fi utilizata in alte scopuri decat cele prevazute.
- Nu scapati lampa si nu o supuneti presiunilor mecanice.
- Nu utilizati niciodata o lupa sau ochelari cu marire optica puternica in conul de lumina al LED-ului. Pericol de incendiu!
- Nu priviti direct in lumina lampii.

Baterii

! AVERTISMENT!

- Scoateti bateriile din lampa imediat ce aceasta este consumata sau daca nu o veti utiliza pentru o perioada lunga de timp.
- Atentie: Nu lasati intotdeauna bateriile la indemana copiilor.
- Nu incarcati, nu reactivati si nu scurtcircuitati bateriile.
- Nu deschideti niciodata o baterie!

- Nu utilizati baterii deteriorate!
- Nu incalziti bateriile! Risc de explozie!
- Aveti grija la bateriile care curg: Aruncati-le imediat conform reglementarilor. Protejati-va pielea de acidul scurs.
- Daca pielea intra in contact cu acidul, spalati bine zona afectata cu apa si sapun. Daca acidul din baterie intra in contact cu ochii, clatiti bine cu apa si consultati imediat un medic.
- Nu lasati bateriile la indemana copiilor. Inghitirea bateriilor poate avea efecte grave asupra sanatatii si chiar poate duce la deces. Daca o baterie este inghitita sau intra in organism, solicitati imediat sfatul medicului.
- Respectati intotdeauna polaritatea atunci cand introduceti bateriile.
- Folositi intotdeauna baterii de acelasi tip. Nu amestecati niciodata baterii noi cu baterii vechi.

Scop si functie

Designul structural al Rollatorului Comfort Plus sustine utilizatorul in timpul deplasarii in ceea ce priveste stabilitatea si echilibrul. Acest lucru imbunatateste mobilitatea individuala, compenseaza mersul instabil si previne caderile. Acesta serveste ca ajutor la mers pentru persoanele cu mobilitate redusa, cu o greutate corporala maxima de 125 kg.

Rollatorul este destinat exclusiv uzului privat si nu este destinat utilizarii comerciale.

Rollatorul este conceput pentru utilizare in interior si in exterior.

In plus, ofera un scaun pentru a contracara epuizarea cauzata de efortul de mers.

Rollatorul este conceput pentru utilizare pe teren ferm si plan. Utilizarea pe gheata, zapada si suprafete umede este interzisa.

Utilizarea Rollator Comfort Plus este potrivita pentru:

- Dificultati de mers din cauza limitarii aparatelor de miscare active sau pasive
- Dificultati de coordonare in faza de alergare
- rezilienta redusa

Utilizarea Rollator Comfort Plus nu este potrivita pentru:

- Tulburari de perceptie
- tulburari severe de echilibru
- o greutate a utilizatorului mai mare de 125 kg

Utilizare preconizata

Respectati instructiunile de siguranta si avertizare din instructiunile de instalare si utilizare.

Rolatorul sustine utilizatorul atunci cand transporta obiecte in geanta din material textil prevazuta in acest scop. Geanta din material textil are o capacitate de aproximativ 9 litri si poate fi incarcata cu maximum 5 kg. Utilizati rolatorul numai conform descrierii din manualul de utilizare.

Lumina LED este utilizata pentru o vizibilitate mai buna. Nu reprezinta iluminare in sensul codului de circulatie rutiera.

Durata de viata recomandata a rolatorului este de maximum 5 ani. (aceste informatii presupun respectarii instructiunilor de manipulare, ingrijire si siguranta prevazute).

Depozitare:

Pentru depozitare, frana de parcare trebuie sa fie intotdeauna activata. Depozitati mersul intr-un loc uscat, la temperatura camerei (aproximativ 20 °C). Protejati-l de inghet, lumina directa a soarelui sau alte influente meteorologice. A nu se lasa la indemana copiilor.

Curatare si ingrijire:

Va rugam sa respectati instructiunile de curatare si ingrijire. Utilizarea necorespunzatoare poate deteriora produsul.

Curatati usor mersul cu apa si un detergent comercial standard. Apoi uscati produsul cu o laveta.

Nu utilizati agenti de curatare agresivi si asigurati-va intotdeauna ca nu expuneti rolatorul la un jet de apa dura (de exemplu, de la un aparat de curatat cu presiune inalta), deoarece acest lucru ar putea deteriora piesele mici sau suprafata produsului.

Intretinere:

Inainte de fiecare utilizare, verificati functionalitatea premergatorului.

Urmatoarele componente necesita o atentie speciala:

- Frane
- Roti
- Conexiuni cu suruburi
- Aspectul general al produsului
- Incuietori



Punerea in functiune

! ATENTIE!







Risc de accidentare prin blocare in timpul intregului proces de asamblare!

Colocarul este livrat pliat.

Desfaceti colocarul:

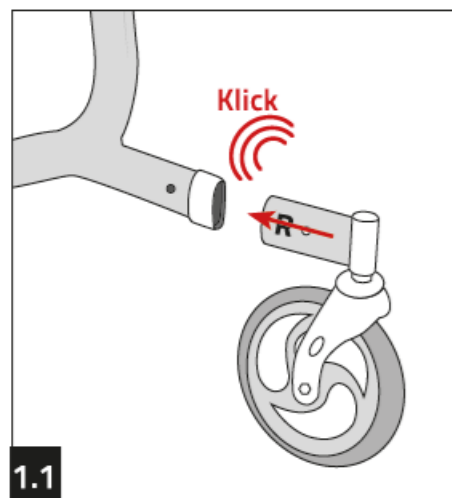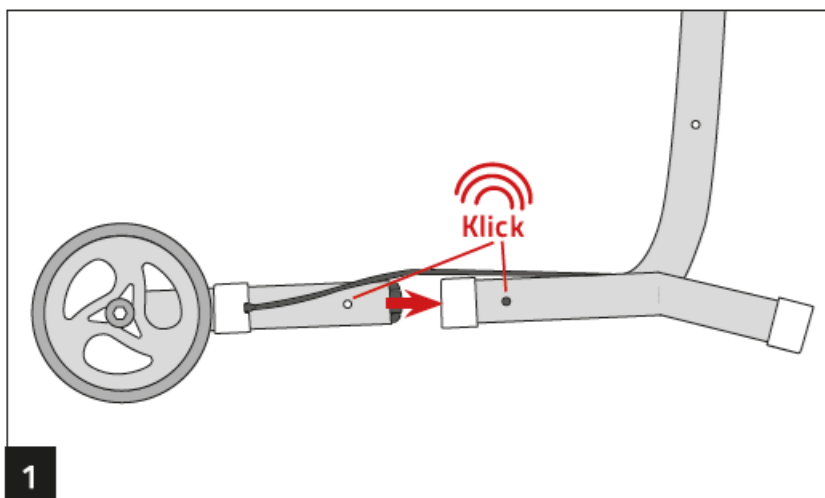

1. Miscati amortizorul rotilor din spate in pozitia corecta si apoi apasati cele doua butoane de pe lateralele amortizorului, astfel incat amortizorul sa se fixeze in orificiul prevazut in cadru.
- 1.1. Repetati aceasta procedura cu rotile din fata, respectand in acelasi timp marcajele (R) si (L) de pe amortizoare.

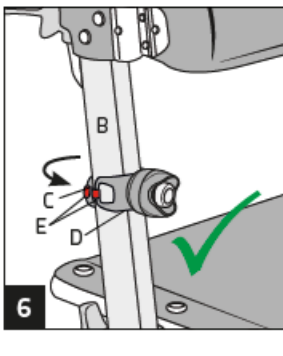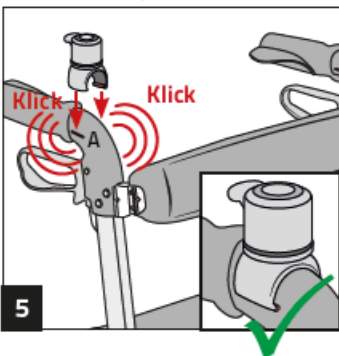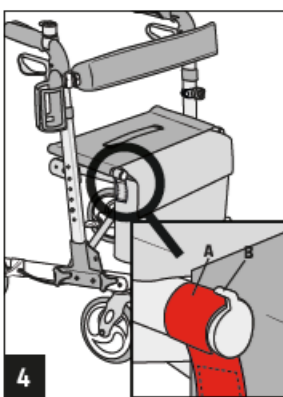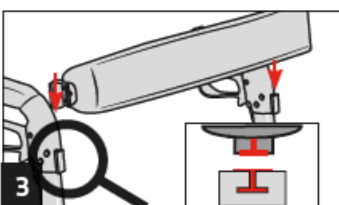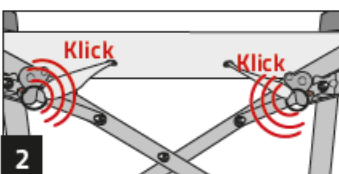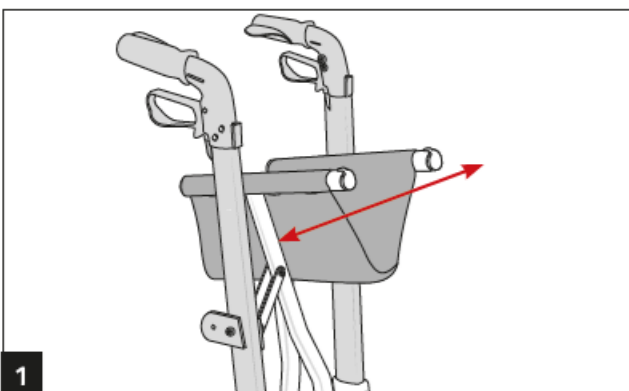


1. Desfaceti rolatorul cat mai larg posibil.
2. Suporturile de sub scaun trebuie sa se fixeze in micile lonjeroane de pe cadru.
3. Acum impingeti cureaua din spate de sus pe dispozitivul de pe manere pana cand se opresc.
4. Inelele (A) sunt atasate in partea dreapta si stanga a gentii. Puneti inelele gentii (A) din stanga si dreapta peste tuburile laterale ale scaunului si apoi prindeti bucla in proeminentele (B) atasate de tub pentru a preveni alunecarea gentii.

Montati clopotelul:

5. Atasati clopotelul la unul dintre manere, pe partea preferata, daca esti dreptaci sau stangaci. Exista adancituri (A) in stanga si dreapta ambelor manere, in care trebuie sa se angajeze cadrul clopotelului. Acestea asigura o prindere sigura a clopotelului pe maner. Montati clopotelul astfel incat sa puteti apasa clopotelul cu degetul mare.

7. Atasati lumina LED la orice tub de aluminiu al manerelor rollatorului (B). Asigurati-va ca lumina poate fi vazuta de traficul care vine din sens opus sau de pietoni. Trageti partea lunga a benzii de cauciuc (C) suficient de mult pentru a putea fi intinsa in jurul tubului de aluminiu (B) si agatata de carligul (E) prevazut pe partea scurta a benzii de cauciuc (D).

Utilizati lumina doar pe rolator. Lumina LED este utilizata pentru a face rolatorul mai vizibil pentru ceilalti participanti la trafic, dar numai intr-o masura limitata pentru a ilumina zona.

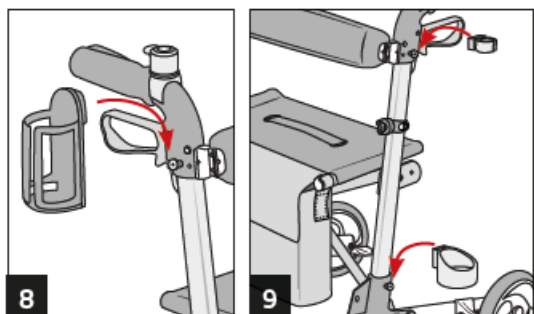

Montarea suportului de pahare:

8. Introduceti suportul de pahare in dispozitivul de pe manerul drept si impingeti in jos pana la capat.

Apoi il puteti folosi.

Montarea suportului pentru baston:

9. Fixati tava de colectare a picaturilor in carligul prevazut in acest scop pe partea inferioara a suportului stang si in clema pentru blocarea tijei bastonului in pozitie, in partea superioara a manerului stang.

Reglarea inaltimii manerelor:



Inaltimea manerului rolatorului poate fi reglata in 6 trepte folosind butoanele de blocare.



Adoptati o pozitie verticala, dar confortabila, si lasati bratele sa atarne lejer. In aceasta pozitie, mainile ar trebui sa poata prinde manerele rolatorului.

! AVERTISMENT!

Reglarea incorecta a inaltimii manerului poate duce la o postura proasta si la alte accidente.

2+3. Utilizati rolatorul numai cu inaltimea manerului setata corect pentru dvs.

Asigurati-va ca ambele manere sunt blocate la aceeasi inaltime. Apasati butonul pentru a slabi manerul si a-l bloca la o inaltime confortabila pentru dvs. Manerul trebuie sa se fixeze la aceeasi inaltime pe ambele parti. Retineti ca manerul trebuie sa fie intotdeauna blocat corect la una dintre cele 6 inaltimi furnizate la punctul 4.

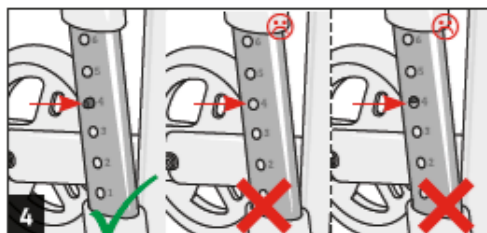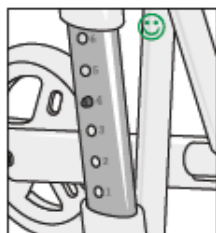

! WARNING!

Pentru un suport optim, tineti rolatorul aproape de corp. Numai atunci mersul in siguranta este garantat. Daca mutati rolatorul prea departe de corp, acesta se poate rostogoli usor si este posibil sa nu fiti sprijinit corespunzator.




Utilizarea franelor:

! AVERTISMENT!


Apasati intotdeauna franele dreapta si stanga simultan, pentru a nu se uza neuniform.

Verificati daca franele sunt reglate corect si functionale inainte de fiecare utilizare. Frana de parcare trebuie intotdeauna activata inainte de a utiliza scaunul. Intrerupeti utilizarea premergatoarei daca franele nu mai pot fi reglate corect.

Franele trebuie reajustate din cand in cand din cauza uzurii. Daca performanta de franare scade sau este neuniforma, trebuie sa strangeti din nou franele.

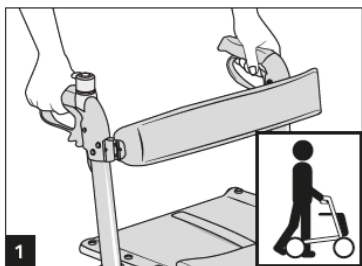

1 Frana de mana (in timpul mersului)
Trageti ambele manete de frana in sus, spre ghidon in acelasi timp si cu aceeasi intensitate. Pentru a o slabi, eliberati-o din nou. Cu cat trageti mai tare, cu atat puterea de franare este mai mare. Daca puterea de franare este prea mica, in ciuda unei trageri ferme, frana poate necesita reglare.

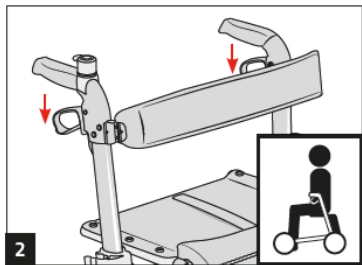





2 Frana de mana (in timpul mersului pe scaun)
Apasati ambele manete de frana in jos pana cand se blocheaza si nu se mai fixeaza. Numai atunci rotile sunt fixate si mersul pe jos nu se mai poate rostogoli. Pentru a o elibera, trageti-l pur si simplu inapoi in pozitia din mijloc aplicand o presiune usoara.

Utilizarea scaunului:

! ATENTIE!

Folositi scaunul numai atunci cand frana de parcare este activata. Nu va lasati impins in timp ce utilizati scaunul si nu impingeti pe altcineva. Exista riscul de cadere! Scaunul trebuie utilizat doar de o singura persoana odata. Nu utilizati premergatorul daca solul este neted sau alunecos.

Schimbarea bateriilor de la LED: 2x baterii buton litiu CR 2032, 3V fiecare

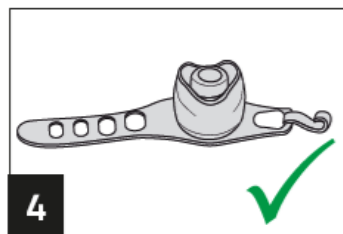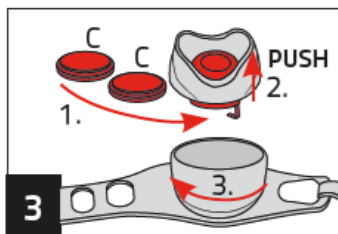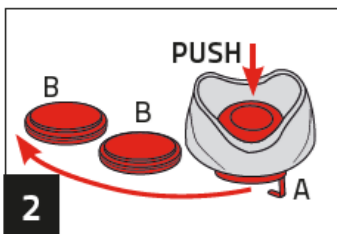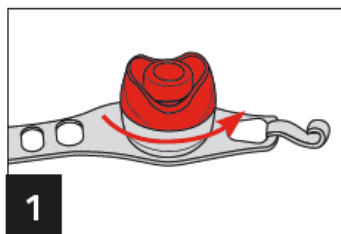


1. Scoateti lumina LED din mers. Rotiti partea superioara a carcasei LED-ului complet, astfel incat sa se slabeasca si scoateti-o.
2. Acum impingeti lampa (A) din carcasa si scoateti cele doua baterii (B). Acordati atentie eliminarii


in mod profesional.

3. 1. Introduceti bateriile noi (C). Acordati atentie polaritatii.
2. Apoi introduceti lampa inapoi in carcasa
3. Inchideti-o.

Plierea rolatorului:

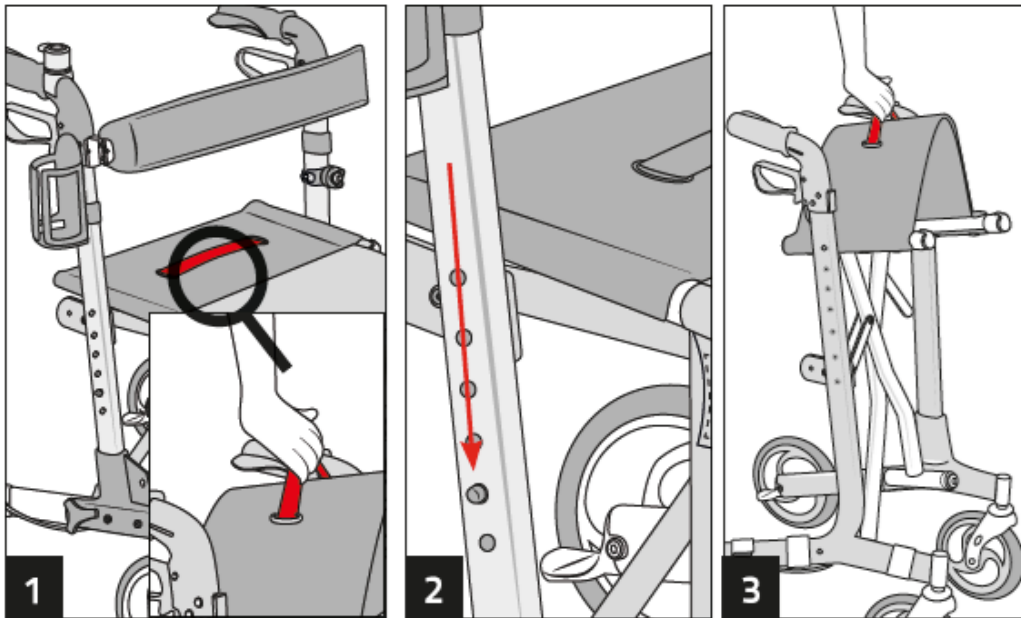

1. 1 Trageți scaunul în sus de clapeta de prindere astfel încât scaunul să se detaseze de suport și rolatorul să se contracte. Apoi folosiți clema pentru a-l fixa pe tuburile scaunului.
2. Dacă este necesar, setați înălțimea manerului la cel mai jos nivel pentru a economisi și mai mult spațiu.
3. Transportați rolatorul pliat folosind manerul.

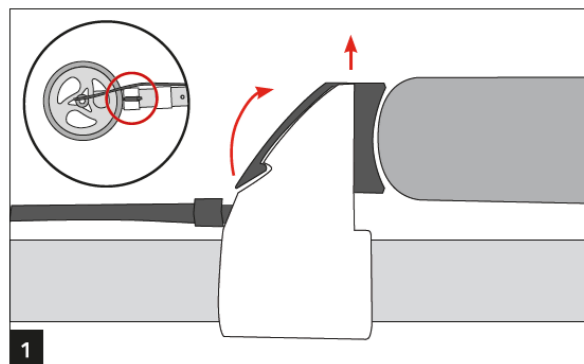

1 Trageți în sus clapeta franei (16) pentru a o elibera din ancoraj. Apoi trageți clapeta înapoi pentru a scoate întregul bloc de frână.

2 Introduceți noul bloc de frână complet în suport până se aude un clic.